




(Iran)

فارسی – Farsi

استفاده آسان:


استنشاق مرحله به مرحله با Easyhaler®

استنشاق بکشید

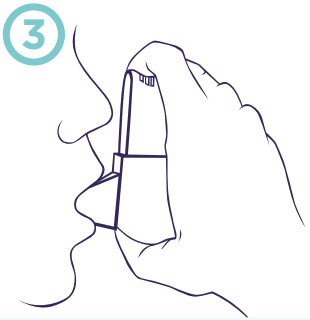


- به صورت عادی نفس بکشید (اما در Easyhaler® تنفس نکنید)
- لبهایتان را محکم دور Easyhaler® ببندید
- به صورت پیوسته و عمیق در Easyhaler® نفس بکشید
- اسپری را بردارید و نفسستان را برای 5 ثانیه حبس کنید
- درپوش محافظ را روی دهانه قرار دهید

کلیک کنید

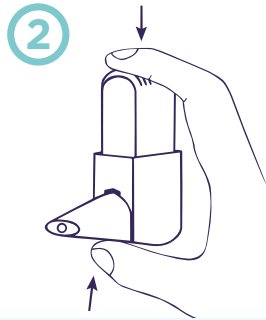


- اسپری را صاف دارید
- انگشت شست خود را پایین آن و انگشت اشاره تان را در بالای آن بگذارید و فشار دهید تا صدای کلیک کردن را بشنوید
- سپس اجازه دهید به حالت قبلی خود برگردد

تکان دهید

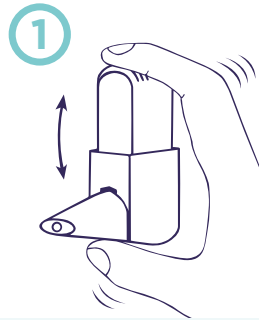

- Easyhaler® را 3 تا 5 بار به خوبی تکان دهید

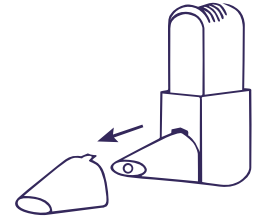


- درپوش محافظ را از روی دهانه بردارید

اگر بیشتر از یک اسپری در هربار برای شما جویز شده است، مراحل 1 تا 3 را تکرار کنید.

برای کاهش دادن خطر عفونت فارچی، دهان و گلو خود را با آب بشویید اما آن را قورت ندهید

شمارنده


Easyhaler® شمارنده‌ای دارد که تعداد دفعه باقی مانده در اسپری را نشان می‌دهد

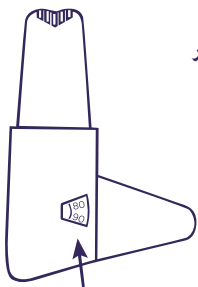

- شمارنده پس از هر 5 مرتبه استفاده تغییر می‌کند
- وقتی اعداد قرمز می‌شوند فقط 25 بار دیگر می‌توانید از اسپری استفاده کنید
- وقتی شمارنده به 0 می‌رسد باید Easyhaler® را تعویض کنید

اگر از محفظه‌ای مرطوب استفاده می‌کنید

برای استنشاق کردن نیازی به خارج کردن Easyhaler® از محفظه مرطوب نیست.

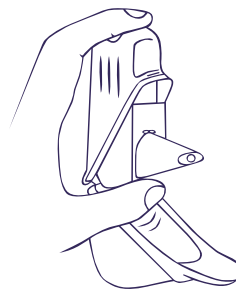


- محفظه مرطوب را باز کنید
- درپوش ایمنی را از دهانه بردارید
- طبق مراحل 1 تا 3 استنشاق کنید
- درپوش محافظ را روی دهانه قرار دهید
- محفظه مرطوب را ببندید

عیب‌یابی

فناوری Easyhaler® از استفاده مقدار دو برابر اندازه مورد نیاز جلوگیری می‌کند!

اگر...

- به صورت تصادفی از Easyhaler® استفاده کنید
- Easyhaler® را بیشتر از یکبار فشار دهید
- در اسپری بدمید
- سپس ...

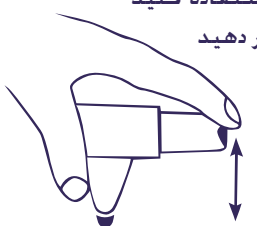

- با دهانه Easyhaler® روی میز
- با دستتان ضربه بزنید

برای کسب اطلاعات بیشتر به این وب سایت مراجعه کنید: www.easyhaler.de



ORION Pharma GmbH

Jürgen-Töpfer-Str. 46 · 22763 Hamburg

Fon 040-899689-0

info-hamburg@orionpharma.com

www.orionpharma.de



Manufactured in Finland

EASYHALER

ORION PHARMA