


Facile à utiliser :


L'inhalation avec le nébuliseur Easyhaler® étape par étape.

Secouez

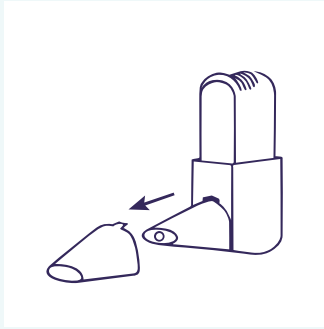

- Retirez le capuchon de protection de l'embout buccal


1

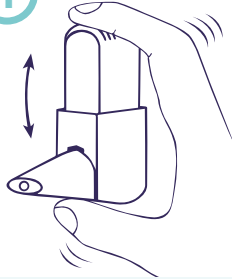

- Secouez énergiquement 3 à 5 fois l'Easyhaler®


Appuyez jusqu'au clic Inhalez

2

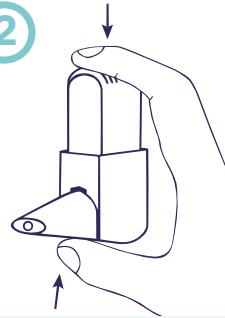

- Tenez le nébuliseur à la verticale
- Appuyez fermement et une seule fois sur le dispositif en le tenant entre le pouce et l'index jusqu'à ce qu'un clic se produise
- Laissez revenir ensuite le dispositif dans sa position initiale

3

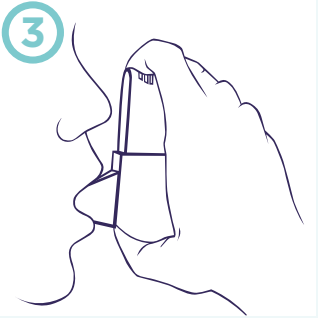

- Expirez normalement (mais PAS dans l'embout de l'Easyhaler®)
- Placez l'embout buccal de l'Easyhaler® dans votre bouche en plaquant bien vos lèvres tout autour
- Inspirez fortement et profondément à travers l'Easyhaler®
- Retirez l'appareil et retenez votre souffle pendant 5 secondes
- Exhalez alors à côté de l'appareil
- Remettez le capuchon de protection sur l'embout buccal


Si plusieurs doses par prise vous ont été prescrites, répétez les points 1 à 3 autant de fois que nécessaire.

► Pour réduire le risque d'infection par des champignons, rincez-vous la bouche et la gorge à l'eau SANS l'avalier.

Le compteur

Le nébuliseur Easyhaler® présente un dispositif de comptage, qui affiche le nombre de doses individuelles encore disponibles.


- Le compteur avance d'un cran après respectivement 5 utilisations
- Une marque rouge apparaît lorsqu'il ne reste plus que 20 doses individuelles
- Lorsque le compteur est à 0, l'Easyhaler® doit être remplacé

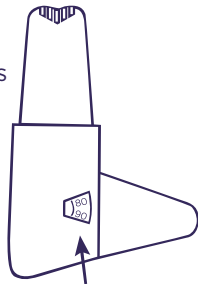

Emploi avec une boîte de protection

Vous N'AVEZ PAS BESOIN de retirer l'Easyhaler® de la boîte de protection pour l'inhalation.

- Ouvrez la boîte de protection
- Retirez l'embout protecteur de la pièce buccale
- Inhalez selon les instructions des étapes 1 à 3
- Installez l'embout protecteur sur la pièce buccale
- Fermez la boîte de protection

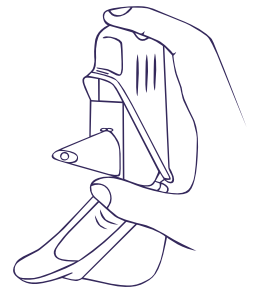

En cas de mauvaise manipulation


La technique de l'Easyhaler® évite le double dosage!

Si...

- vous avez appuyé sur l'Easyhaler® par erreur
- vous avez appuyé plus d'une fois sur l'Easyhaler®
- vous avez expiré dans l'appareil

Alors...

- tapotez l'embout buccal de l'Easyhaler® contre le plateau d'une table ou dans votre main

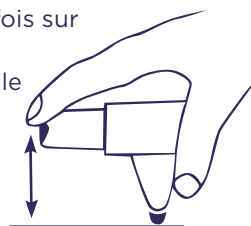

Vous trouvez d'autres informations sur le site: www.easyhaler.de



ORION Pharma GmbH

Jürgen-Töpfer-Str. 46 · 22763 Hamburg
Fon 040-899689-0
info-hamburg@orionpharma.com
www.orionpharma.de

 Manufactured in Finland

ORION PHARMA

EASYHALER