



Лесна употреба:

Инхалация с Easyhaler® стъпка по стъпка.

Разклащане

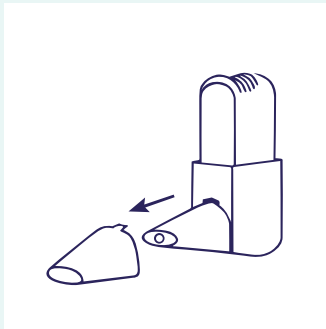


- Свалете защитната капачка от края на устата

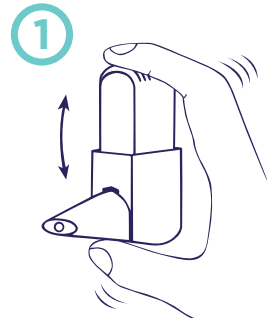


- Разклатете Easyhaler® енергично 3 до 5 пъти вертикално

Щракване

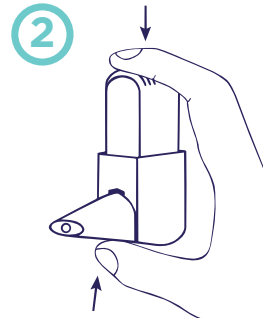

- Задръжте уреда вертикално
- Притиснете здраво между палеца и показалеца, докато чуе щракване
- След това се плъзнете обратно в изходна позиция

Инхалиране

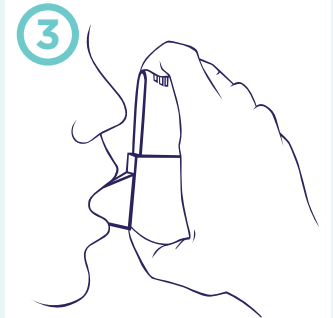

- Издишайте нормално (но НЕ в Easyhaler®)
- Обхванете Easyhaler® здраво с устните си
- Вдишайте силно и дълбоко през Easyhaler®
- Извадете уреда и задръжте дъха си за 5 секунди
- След това издишайте до уреда
- Поставете защитната капачка върху края на устата


Ако Ви е предписана повече от една доза за приложение, повторете стъпките от 1 до 3.

За да намалите риска от гъбична инфекция, изплаквайте устата и гърлото си с вода, БЕЗ да я поглъщане.

Показание на брояча

Easyhaler® е оборудван с брояч, който показва колко единични дози са останали.

- След всяко 5-о приложение броячът отчита напрег
- Червената маркировка показва: остават още 20 единични дози
- Ако броячът е на 0, Easyhaler® трябва да бъде сменен

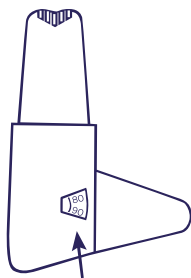

Ако използвате защитна кутия

Easyhaler® НЕ трябва да се изважда от защитната кутия, когато се прави инхалация.

- Отворете защитната кутия
- Свалете защитната капачка от края на устата
- Инхалирайте, както е описано в стъпките 1 до 3
- Поставете защитната капачка върху края на устата
- Затворете защитната кутия



В случай на неправилна употреба

Технологията на Easyhaler® предотвратява двойното дозиране!

Ако...

- Easyhaler® е бил зареден по грешка
- сте издишали в уреда

След това...

- Почукайте Easyhaler® с края на устата върху плота на масата или в ръката си



Допълнителна информация можете да намерите на адрес: www.easyhaler.de



ORION Pharma GmbH

Jürgen-Töpfer-Str. 46 · 22763 Hamburg
Fon 040-899689-0
info-hamburg@orionpharma.com
www.orionpharma.de

 Manufactured in Finland