


易于使用:


使用 Easyhaler® 吸入治疗分步详解。

摇晃

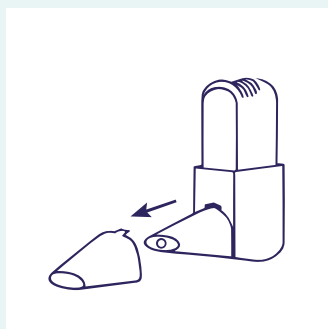


- 取下含嘴上的盖子

①

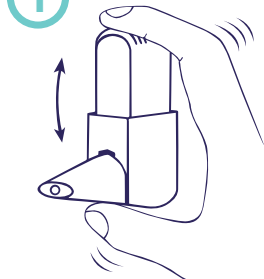


- 竖直握住 Easyhaler®, 用力摇晃3至5次

按压

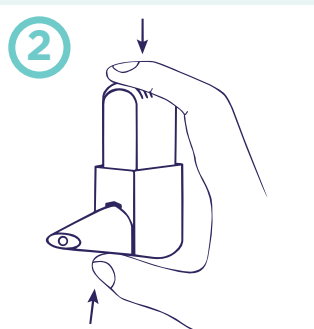

- 竖直握住设备
- 用拇指和食指用力挤压, 直到听到咔哒声
- 然后让设备自己滑回到起始位置

吸入

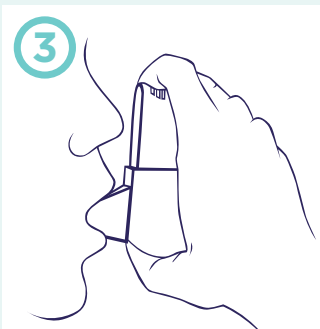

- 正常呼气 (但不要呼入 Easyhaler®)
- 用双唇紧紧含住 Easyhaler®
- 通过 Easyhaler® 深深吸气
- 取出设备, 屏气5秒钟
- 然后在设备旁边呼气
- 将盖子套在含嘴上


如果医嘱每次使用超过一个剂量, 请重复步骤1至3。

为了降低真菌感染的风险, 请用水漱口, 冲洗口腔和咽部, 然后把水吐掉。

计数器

Easyhaler® 有一个计数器, 可显示剩余的剂量。


- 每使用5次后, 计数器上的数字就会依次减少
- 红色标记表示: 还剩20个剂量
- 如果计数器显示0, 就必须更换 Easyhaler®

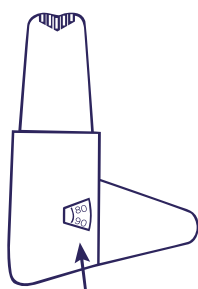

如果使用保护盒

吸入时无需将 Easyhaler® 从保护盒中取出。

- 打开保护盒
- 取下含嘴上的盖子
- 如步骤1至3所述吸入药剂
- 将盖子套在含嘴上
- 关闭保护盒

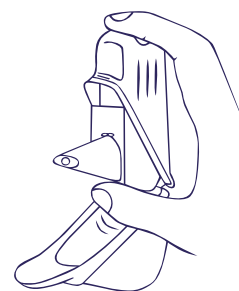

错误使用


Easyhaler® 的技术可防止重复给药!

如果……

- 将 Easyhaler® 错误装药
- 往设备中呼气

就应……

- 将 Easyhaler® 的含嘴放在桌面上或放在手心上扣打

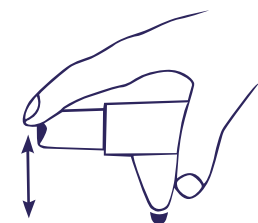

更多信息请访问:
www.easyhaler.de



ORION Pharma GmbH

Jürgen-Töpfer-Str. 46 · 22763 Hamburg
电话 040-89 96 89 -0
info-hamburg@orionpharma.com
www.orionpharma.de