


Sử dụng đơn giản:


Hướng dẫn hít thuốc bằng Easyhaler® từng bước.

Lắc

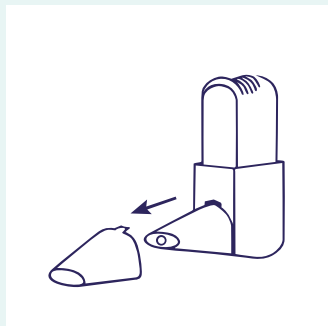

- Tháo nắp bảo vệ khỏi ống ngậm


①

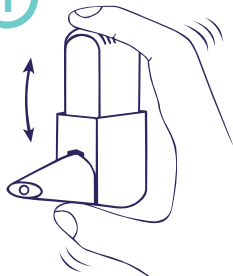

- Lắc mạnh Easyhaler® theo chiều dọc từ 3 đến 5 lần

Nhấn


②

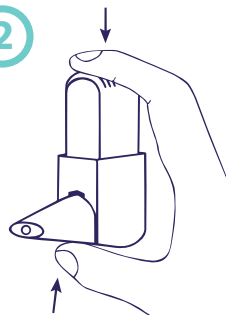

- Giữ thiết bị theo chiều dọc
- Nhấn mạnh giữa ngón cái và ngón trỏ cho đến khi bạn nghe thấy tiếng kêu tách
- Sau đó trượt trở lại vị trí ban đầu

Hít vào

③

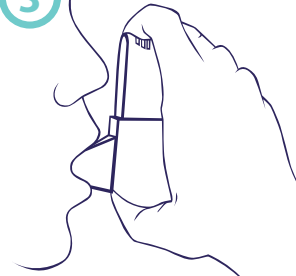

- Thở ra bình thường (nhưng KHÔNG phải vào Easyhaler®)
- Ngậm chặt môi quanh Easyhaler®
- Hít mạnh và sâu qua Easyhaler®
- Bỏ thiết bị ra và nín thở trong 5 giây
- Sau đó thở ra cạnh thiết bị
- Đặt nắp bảo vệ vào ống ngậm


Nếu bạn được kê đơn nhiều hơn một liều cho mỗi lần sử dụng, hãy lặp lại các bước từ 1 đến 3.

Để giảm nguy cơ nhiễm nấm, hãy súc miệng và cổ họng bằng nước mà KHÔNG nuốt.

Đọc đồng hồ đo

Easyhaler® có bộ đếm hiển thị số liều dùng còn lại.


- Sau mỗi lần sử dụng thứ 5 Bộ đếm tiếp tục di chuyển
- Dấu đỏ cho biết: chỉ còn 20 liều duy nhất
- Khi bộ đếm ở mức 0, Easyhaler® phải được thay thế

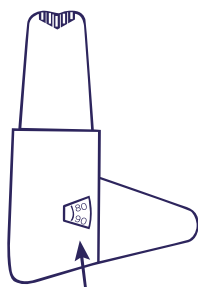

Nếu bạn sử dụng hộp bảo vệ

KHÔNG cần phải lấy Easyhaler® ra khỏi hộp bảo vệ để hít.

- Mở hộp bảo vệ
- Tháo nắp bảo vệ khỏi ống ngậm
- Hít vào như mô tả ở các bước từ 1 đến 3
- Đặt nắp bảo vệ vào ống ngậm
- Đóng hộp bảo vệ

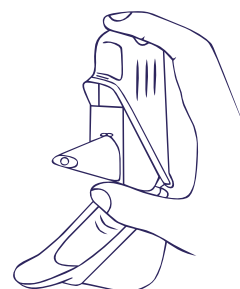

Trong trường hợp sử dụng sai cách


Công nghệ Easyhaler® ngăn ngừa việc dùng thuốc hai lần!

Nếu như...

- Easyhaler® đã vô tình bị nạp
- thở ra vào thiết bị

Hãy..

- Gõ nhẹ Easyhaler® bằng ống ngậm lên mặt bàn hoặc trong tay bạn

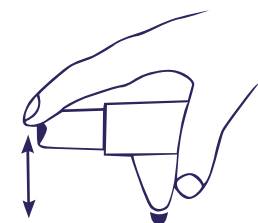

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập:
www.easyhaler.de



Công ty TNHH Dược phẩm ORION

Jürgen-Töpfer-Str. 46 · 22763 Hamburg

Điện thoại 040-89 96 89 -0

info-hamburg@orionpharma.com

www.orionpharma.de