

Cum se utilizează Easyhaler®


Romanian



MARCH 2021/EASYH-413i(1)

Pentru mai multe informații, citiți prospectul dispozitivului Easyhaler. Dacă aveți nevoie de asistență suplimentară, solicitați sfaturi din partea personalului medical.


1

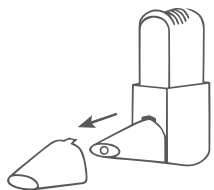

Îndepărtați capacul de protecție de pe dispozitivul de dozare

2

Agitați

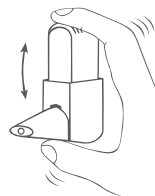

Agitați Easyhaler în mod energic de 3-5 ori

3


Apăsați



- Țineți inhalatorul în poziție verticală
- Apăsați ferm, ținând degetul mare la bază și degetul arătător în partea superioară, până când auziți un clic
- După aceea, lăsați dispozitivul să revină la poziția inițială

4

Inhalați

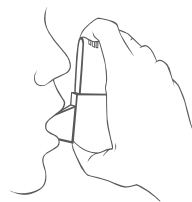

- Expirați normal (dar NU în Easyhaler)
- Amplasați dispozitivul de dozare între dinți și închideți strâns buzele în jurul acestuia
- Inspirați cât se poate de adânc
- Scoateți inhalatorul și țineți-vă respirația timp de 5 secunde (nu este obligatoriu pentru toate produsele Easyhaler; consultați informațiile din pachet)

Dacă vi s-a prescris mai mult de o doză la fiecare aplicare, repetați pașii 2-4.

La final, înlocuiți capacul de siguranță de pe dispozitivul de dozare.


Soluționarea problemelor

Dacă...

- ați încărcat Easyhaler în mod accidental
- apăsați pe Easyhaler mai mult decât o dată
- suflați în inhalator

După aceea...

- bateți ușor dispozitivul de dozare al Easyhaler de o masă sau în palmă

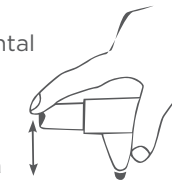

După administrarea dozei cu corticosteroizi inhalatori (măsuri de siguranță)


Pentru a reduce riscul unei infecții fungice, clătiți-vă gura și gâtul cu apă și scuipați, nu înghițiți.

Dacă utilizați o carcasă de protecție

Pentru a-l proteja împotriva umezelii, Easyhaler poate fi folosit cu o carcasă de protecție.

Cu Easyhaler în carcasa de protecție, deschideți carcasa și urmați pașii 1-4 de pe verso, apoi închideți carcasa.


Pentru a solicita o carcasă de protecție pentru Easyhaler, contactați echipa noastră de informații medicale la numărul 01635 520300.

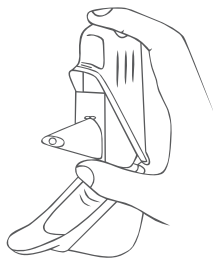

Contorul

Easyhaler este echipat cu un contor care indică numărul de doze unice rămase în inhalator.

- Indicația contorului se schimbă după fiecare 5 doze unice
- Atunci când numerele devin roșii, au mai rămas numai 20 de doze unice. În acest moment, trebuie să solicitați o rețetă nouă pentru un Easyhaler nou.
- Atunci când contorul ajunge la 0, începeți să utilizați noul Easyhaler. În inhalatorul gol va rămâne o cantitate mică de pudră, care nu trebuie folosită.

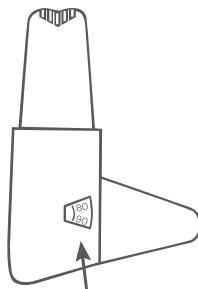

Când trebuie să înlocuiți Easyhaler?

Data de expirare este tipărită pe ambalaj. Nu utilizați Easyhaler după această dată.

În prospect veți găsi informații privind perioada de utilizare a dispozitivului după ce ați deschis folia protectoare. Pentru a reține acest lucru, notați data la care ați deschis folia protectoare.

Curățarea

Curățați dispozitivul de dozare cel puțin o dată pe săptămână cu un șervețel sau cu o lavetă uscată și curată.

NU UTILIZAȚI APĂ SAU ALTE LICHIDE.



Raportarea efectelor secundare

Dacă prezentați orice efecte secundare, consultați medicul, farmacistul sau asistentul medical. Acestea includ toate efectele secundare posibile care nu sunt menționate în prospect. De asemenea, puteți raporta efectele secundare în mod direct, accesând Yellow Card Scheme la adresa: www.mhra.gov.uk/yellowcard.

Prin raportarea efectelor secundare, puteți ajuta la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța medicamentului.

Orion Pharma (UK) Ltd,
Abbey Gardens,
4 Abbey Street,
Reading, RG1 3BA, UK



VIDEOCLIP CU INSTRUCȚIUNI PENTRU EASYHALER

Puteți scana codul QR sau accesa adresa web de pe cutia produsului Easyhaler, de pe prospect sau de pe eticheta inhalatorului pentru a urmări un videoclip despre modul de utilizare al dispozitivului.

Pentru produsele Easyhaler cu ambalaj fără cod QR sau adresă web, accesați www.oeh.fi/uk pentru a urmări videoclipul.